ИННОВАЦИИ В ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ




Выдвигающиеся канюли FlexTip™

Канюля имеет мягкий силиконовый наконечник, который может быть выдвинут до 7 мм. Резервуар канюли позволяет создать рефлюкс даже когда канюля выдвинута. Съемный клапан позволяет использовать канюлю для активной/пассивной аспирации. Идеальна для аспирации субретинальной жидкости через существующий разрыв или отверстие.

3279 Выдвигающаяся канюля FlexTip™ 20g Активная
 3299 Выдвигающаяся канюля FlexTip™ 23g Активная

3298 Выдвигающаяся канюля FlexTip™ 25g Активная

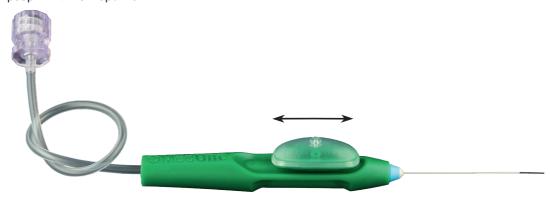

Канюли-щетки FlexTip™

Мягкая силиконовая щетка позволяет нежно очищать сетчатку и совершать манипуляции с ней. Идеально подходит для удаления стекловидного тела с поверхности сетчатки.



- **3215 Канюля-щетка FlexTip[™] 20g (1 мм)** Длина 32 мм, силиконовый наконечникщетка 1 мм
- **3232 Канюля-щетка FlexTip[™] 23g (1,5 мм)** Длина 32 мм, силиконовый наконечникщетка 1,5 мм
- **3222 Канюля-щетка FlexTip[™] 25g (1,5 мм)** Длина 32 мм, силиконовый наконечникщетка 1,5 мм

Выдвигающаяся канюля-щетка FlexTip™

Канюля имеет мягкий силиконовый наконечник, который может быть выдвинут до 1,5 мм. Легко вводить в троакар с внутренним клапаном. Съемный клапан позволяет использовать канюлю для активной\ пассивной аспирации.





Канюли FlexTip™

Канюли FlexTip™ снабжены мягким гибким силиконовым наконечником для аккуратного доступа к сетчатке. Идеальны для аспирации субретинальной жидкости через существующий разрыв или отверстие. Система luer lock обеспечивает надежность соединения с рефлюксной рукояткой или шприцом. Удлиненный силиконовый наконечник позволяет достигать труднодоступных участков при аспирации субретинальной жидкости. Канюли размера XL большей длины (36мм), облегчают доступ к сетчатке у пациентов с высокой близорукостью или длинным глазом.

3238 Канюля FlexTip™ 20g

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 1 мм

3211 Канюля FlexTip™ 20g

Длина 28 мм, силиконовый наконечник 6 мм

3208 Канюля XL FlexTip ™ 20g

Длина 36 мм, силиконовый наконечник 3 мм





новинка 3252 Канюля FlexТір™ <mark>23</mark>g

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 0,75 мм

3230 Канюля FlexTip™ 23g

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 1 мм

3231 Канюля FlexTip™ 23g

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 3 мм

3242 Канюля FlexTip™ 23a

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 5 мм

3209 Канюля XL FlexTip ™ 23g

Длина 36 мм, силиконовый наконечник 3 мм

XL длина





Короткий силиконовый наконечник 0,75 мм обеспечивает легкость введения в троакар с внутренним клапаном и идеально подходит для аспирации субретинальной жидкости на поверхности сетчатки. Удлиненные силиконовые наконечники 3 мм и 5 мм лучше всего подходят для аспирации субретинальной жидкости через существующий разрыв или отверстие.

новинка 3251 **Канюля FlexTip™ 25g**

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 0,75 мм

3221 Канюля FlexTip™ 25g

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 1 мм

3220 Канюля FlexTip™ 25g

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 3 мм

3224 Канюля FlexTip™ 25g

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 5 мм

3210 Канюля XL FlexTip[™] 25g

Длина 36 мм, силиконовый наконечник 3 мм

новинка 3260 Канюля FlexТір™ 27g

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 0,75 мм

3258 Канюля FlexTip™ 27g

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 1 мм



Двухходовые канюли

Канюли с двумя отверстиями позволяют одновременно вводить жидкость, такую как перфторуглерод или краситель, через центральный просвет внутренней канюли, и снижать давление благодаря пассивному выходу жидкости или воздуха через отверстие в наружной канюле. Дизайн двухходовой канюли позволяет предотвратить образование пузырьков во время введения перфторуглерода, что обеспечивает непрерывность операции.

НОВИНКА Двухходовые канюли SideFlo®


Двухходовые канюли SideFlō оптимально подходят для введения хирургических жидкостей при хирургии малых разрезов (27/29g). Благодаря введению жидкости через боковое отверстие снижена возможность повреждения сетчатки потоком. Многочисленные отверстия в наружной канюле увеличивают выход жидкости вдвое по сравнению с оригинальной версией, тем самым позволяют быстрее снизить давление. Легко вводится в троакар с внутренним клапаном.

Патент #9937300

3423 Двухходовые канюли 23g

3425 Двухходовые канюли 25д

3427 Двухходовые канюли 27q

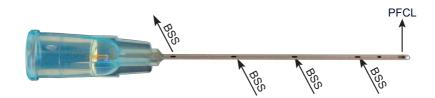

Двухходовые канюли

Двухходовые коаксиальные канюли имеют удлиненную внутреннюю канюлю для введения жидкости и наружную канюлю с вентиляционным отверстием для пассивного выхода жидкости или воздуха.

3237 Двухходовые канюли 20д

3239 Двухходовые канюли 23g

3240 Двухходовые канюли 25д





Стандартные витреоретинальные канюли

Тонкостенные канюли с тупым наконечником предназначены для введения или аспирации жидкостей. Канюли размера XL большей длины (36 мм), облегчают доступ к сетчатке у пациентов с высокой близорукостью или длинным глазом. Тонкие стенки позволяют увеличить скорость потока. Система luer lock обеспечивает надежность соединения с рефлюксной рукояткой или шприцом.

Стандартная длина



XL длина



- **3214 Канюля 20g** длина 28 мм
- **3205 Канюля XL 20g** длина 36 мм
- **3234 Канюля 23g** длина 32 мм
- **3206 Канюля XL 23g** длина 36 мм
- **3225 Канюля 25g** длина 32 мм
- **3207 Канюля XL 25g** длина 36 мм
- **3257 Канюля 27**g длина 32 мм

Инфузионные канюли

Тонкие стенки канюли 20g позволяют достичь максимальной скорости подачи жидкости или газа. Гладкий скошенный наконечник канюли (длиной 4 мм или 6 мм) позволяет легко вводить ее через склеротомию. Выступы для подшивания зеленого цвета, что улучшает их визуализацию. Система luer lock обеспечивает надежность соединения с инфузионной линией.



- **3202 Инфузионные канюли, 4 мм 20g** Инфузионная трубка 25 см, наконечник 4 мм
- **3203 Инфузионные канюли, 6 мм 20g** Инфузионная трубка 25 см, наконечник 6 мм








Инфузионные канюли VFI

Канюли VFI имеют очень тонкие стенки, что позволяет вводить тяжелые жидкости, такие как силиконовое масло, через порты троакара. Система luer lock обеспечивает надежность соединения с инфузионной линией, шприцом или удлиняющей трубкой.

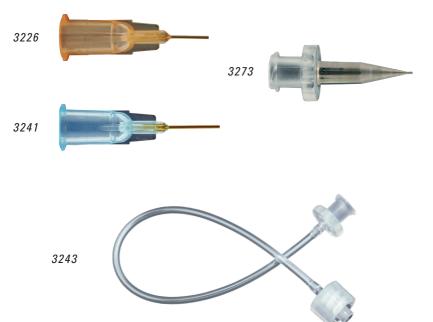

- 3235 **Канюля PolyTip® VFI 23g** (7 мм)
 - Длина канюли 7 мм
- 3241 Канюля PolyTip® VFI 23g (10 мм)
 Длина канюли 10 мм позволяет вводить силикон в различные сегменты глаза и
 - позволяет видеть наконечник канюли во время ее использования
- **3226 Канюля PolyTip® VFI <u>25g</u> (7 мм)** Длина канюли 7 мм
- **3273 Канюля VFI 27g** Длина наконечника 1мм
- 3243 Удлиняющая трубка для введения жидкости под высоким давлением

Силиконовая трубка длиной 15 см с замками luer lock (папа/мама). Может использоваться с вышеперечисленными канюлями для введения тяжелых жидкостей

новинка Канюля для удаления силиконового масла [Kapran]

Инновационная канюля позволяет удалить масло через малое отверстие без последующего наложения швов. Используя стандартную технику, установите троакар. Затем присоедините трубку-переходник к порту канюли и удалите масло, используя стандартный шприц или систему прибора.

3300 Канюля для удаления силиконового масла 23g [Kapran]

Система состоит из рукоятки, троакара и трубки-переходника











Инфузионные канюли VFI


Канюли VFI специально предназначены для введения силиконового масла «hands-free» через троакар при выполнении операций 23 и 25g, при этом силикон вводится в 2 раза быстрее, чем при использовании обычных канюль. Просто установите канюлю VFI в порт троакара и вводите силиконовое масло или БСС. Идеальна для обмена PFO на масло. Не совместима с троакаром Алкон.

3246 Инфузионная канюля VFI 23g

3245 Инфузионная канюля VFI 25g





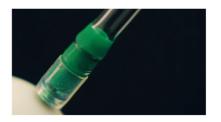

Инфузионные канюли для введения вязких жидкостей

Усиленные стенки трубок инфузионных канюль позволяют быстро ввести силиконовое масло под высоким давлением при хирургии 20g. Канюля может быть использована также для введения БСС. Выступы для подшивания зеленого цвета, что улучшает их визуализацию. Система luer lock надежно соединяет канюлю с инфузионной линией.

- **3200 Канюля для вязкой жидкости 20g (4 мм)** Инфузионная трубка 16 см с наконечником 4 мм
- **3201 Канюля для вязкой жидкости 20g (4 мм)** Инфузионная трубка 16 см с наконечником 6 мм







Рефлюксная рукоятка

Рукоятки Backflush высоко функциональны и эргономичны. Легкость манипуляции во время хирургии, достигается благодаря короткой рукоятке, особенно при использовании широкоугольных систем. Дизайн области захвата рукоятки позволяет обеспечить четкий контроль во время хирургических процедур. Наличие системы luer lock позволяет быстро присоединить совместимые с ней канюли, включая все канюли MedOne. Съемный клапан позволяет использовать рукоятку для активной и пассивной аспирации.

3228 Рефлюксная рукоятка



Рефлюксные инструменты Backflush

Компания MedOne объединила самые популярные канюли и аспирационные рукоятки в один удобный инструмент, позволяющий точно контролировать аспирацию. Есть инструменты с активной и пассивной аспирацией.

- 3286 Рефлюксная рукоятка с канюлей 23g Пассивная
- 3290 Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™ 23g Активная
- **3295** Рефлюксная рукоятка с канюлей **25**g Пассивная
- 3296 Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™ 25g Активная
- 3276 Рефлюксная рукоятка с канюлей 27g Пассивная
- **3278** Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexТір™ 27g Активная





Субретинальные канюли

Канюли с изменяющимся диаметром PolyTip®

Эти канюли снабжены наконечником 38g и идеально подходят для субретинальных инъекций. Наконечник достаточно жесткий, для того чтобы пройти через сетчатку без предварительной ретинотомии. Канюли могут быть использованы для аспирации малых объемов жидкости, например удаления

субретинального перфторуглерода.

3233 Канюля PolyTip® 23g/38g

Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 23g, диаметр наконечника 38g (0,12 мм), длина наконечника 5 мм

новинка 3254 Канюля PolyTip® 23g/38g

Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 23g, диаметр наконечника 38g (0,12 мм), длина наконечника 2 мм зеленого цвета

3219 Канюля PolyTip® 25g/38g

Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 25g, диаметр наконечника 38g (0,12 мм), длина наконечника 5 мм

новинка 3255 Канюля PolyTip® 25g/38g

Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 25g, диаметр наконечника 38g (0,12 мм), длина наконечника 2 мм зеленого цвета

3259 Канюля PolyTip® 27g/38g


Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 27g, диаметр наконечника 38g (0,12 мм), длина наконечника 5 мм


новинка 3256 Канюля PolyTip® 27g/38g

Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 27g, диаметр наконечника 38g (0,12 мм), длина наконечника 2 мм зеленого цвета

Канюли PolyTip® компании MedOne являются эквивалентом канюль "41g" других брендов

внешний диаметр: 38g внутренний диаметр: 41g

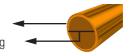

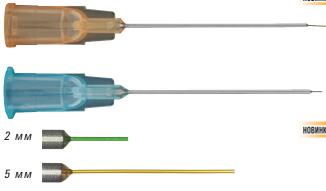


Наконечник зеленого цвета 2 мм легко вводится в троакар с внутренним клапаном и обеспечивает хорошую визуализацию. Более короткий наконечник обладает жесткостью достаточной для прохождения через сетчатку, а наконечник 5 мм более гибкий.

Выдвигающиеся канюли с изменяющимся диаметром

Выдвигающиеся канюли с изменяющимся диаметром PolyTip® имеют наконечник 38g, который можно полностью убирать и легко вводить в троакар с внутренним клапаном. Наконечник может быть выдвинут до 5 мм. Более короткие трубки снижают потерю жидкости во время введения. Объем просвета трубок 0,1 мл.

3248 Выдвигающаяся канюля PolyTip® 23g/38g с наконечником 38g (0,12 мм)

3247 Выдвигающаяся канюля PolyTip® 25g/38g с наконечником 38g (0,12 мм)

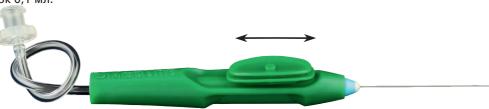



Субретинальные канюли

Канюли с изменяющимся диаметром PolyTip®

Канюли с изменяющимся диаметром PolyTip® имеют уникальные технические характеристики: полугибкий наконечник очень маленького диаметра с чрезвычайно тонкими стенками позволяет обеспечить максимально возможный поток жидкости. Система luer lock обеспечивает надежность соединения канюли с инфузионной линией, шприцом или удлиняющей трубкой.



3218 Канюля PolyTip® <mark>25g</mark>/31g

Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 25g, диаметр наконечника 31g, длина наконечника 5 мм. Канюля 31g идеально подходит для дренажа макулярного отверстия и аспирации жидкости.

3262 Канюля PolyTip® 25g/33g

Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 25g, диаметр наконечника 33g, длина наконечника 2 мм. Канюля 33g используется для прохождения через сетчатку и аспирации жидкости через минимально травматичное отверстие. Тонкие стенки наконечника позволяют обеспечить уровень потока равный создаваемому мягким наконечником 25g, тем не менее, через меньшее отверстие. Зеленый наконечник обеспечивает лучшую визуализацию.

Изогнутая канюля с изменяющимся диаметром наконечника

Микроканюля имеет скошенный наконечник диаметром 40g (0.1 мм). Металлическая канюля со скошенным наконечником легко проходит через сетчатку во время субретинальных инъекций. Легкий изгиб обеспечивает прекрасную визуализацию наконечника и хороший угол доступа в субретинальное пространство. Совместима с троакарами 25g.

3261 Канюля с изогнутым наконечником MicroTip 25g/40g

Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 25g, диаметр наконечника 40g (0,1 мм), длина наконечника 5 мм





наконечник MicroTip

Удлиняющая трубка

Короткая силиконовая удлиняющая трубка отделяет шприц от канюли, позволяя точно позиционировать канюлю, когда инъекция выполняется другой рукой или когда инъекцию выполняет ассистент. Просвет трубки имеет объём всего 0,2 мл, что сокращает потерю жидкости и увеличивает скорость доставки жидкости в место инъекции.


3223 Удлиняющая трубка (Hammer)



Канюля для введения вискоэластиков

Канюля для вискодиссекции 25g имеет выдвигающийся изогнутый наконечник, который позволяет вводить вискоэластик для мягкой диссекции эпиретинальных мембран. В выдвинутом состоянии изогнутый наконечник позволяет вводить вискоэластик параллельно сетчатке, в убранном состоянии легко вводится в троакар. Система luer lock позволяет легко присоединить шприц.

3274 Канюля для вискодиссекции 25g

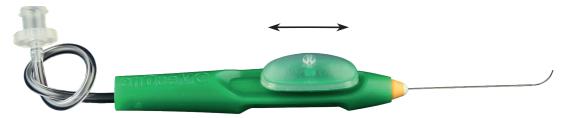

Канюля с наконечником в форме оливки [El Rayes]

Изогнутая канюля с наконечником в форме оливки разработана для введения жидкости, в первую очередь в переднее супрахориоидальное пространство. Особенно удобно для введения вискоэластиков, чтобы достигнуть эффекта пломбирования при лечении периферийной отслойки сетчатки. Канюлю также можно использовать для введения лекарственных средств или удаления стекловидного тела или другой жидкости из супрахориоидального пространства.

3311 Канюля с наконечником в форме оливки 23g [El Rayes]



наконечник в форме оливки





20g	ПРОДУКТЫ	
3200	Канюля для вязкой жидкости (Hammer) , 4мм	
3201	Канюля для вязкой жидкости (Hammer) , 6мм	
3202	Инфузионные канюли, 4мм	
3203	Инфузионные канюли , 6мм	
3205	Канюля XL 0,9 мм	
3208	Канюля XL FlexTip ™ 0,9 мм (наконечник 3 мм)	
3211	Канюля FlexTip™ (наконечник 6 мм)	
3214	Канюля 0,9 мм	
3215	Канюля-щетка FlexTip™ (наконечник 1 мм)	
3237	Двухходовая канюля	
3238	Канюля FlexTip™ (наконечник 1 мм)	
3279	Выдвигающаяся канюля FlexTip™ (Активная)	
23а ПРОДУКТЫ		

23g	ПРОДУКТЫ
3206	Канюля XL 0,6 мм
3209	Канюля XL FlexTip™ 0,6 мм (наконечник 3 мм)
3230	Канюля FlexTip™ 0,6 мм (наконечник 1 мм)
3231	Канюля FlexTip™ 0,6 мм (наконечник 3 мм)
3232	Канюля-щетка FlexTip™ (наконечник 1.5 мм)
3233	Канюля PolyTip® (23/38g)
3234	Канюля 0,6 мм
3235	Канюля PolyTip® VFl 7мм
3239	Двухходовая канюля
3241	Канюля PolyTip® VFI 10мм
3242	Канюля FlexTip™ (наконечник 5 мм)
3246	Инфузионная канюля VFI
3248	Выдвигающаяся канюля PolyTip® (20/38g)
3252	Канюля FlexTip™ (наконечник 0,75 мм)
3254	Канюля PolyTip 23g/38g (зеленый наконечник 2 мм)
3286	Рефлюксная рукоятка с канюлей (Пассивная)
3290	Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™ (Активная)
3299	Выдвигающаяся канюля FlexTip™ (Активная)
3300	Канюля для удаления масла (Kapran)

25g	ПРОДУКТЫ
3207	Канюля XL 0,5 мм
3210	Канюля XL FlexTip™ (наконечник 3 мм)
3218	Канюля PolyTip® (25/31g)
3219	Канюля PolyTip® (25/38g)
3220	Канюля FlexТiр™ (наконечник 3 мм)
3221	Канюля FlexTip™ (наконечник 1 мм)
3222	Канюля-щетка FlexTip™ (наконечник 1.5 мм)
3224	Канюля FlexTip™ (наконечник 5 мм)
	Канюля

3226	Канюля PolyTip® VFI 7мм
3240	Двухходовая канюля
3245	Инфузионная канюля VFI
3247	Выдвигающаяся канюля PolyTip® (20/38g)
3251	Канюля FlexTip™ (наконечник 0,75 мм)
3255	Канюля PolyTip 23g/38g (зеленый наконечник 2 мм)
3261	Канюля с изогнутым наконечником MicroTip (25g/40g)
3262	Канюля PolyTip® (25g/33g)
3274	Канюля для вискодиссекции 25g
3295	Рефлюксная рукоятка с канюлей (Пассивная)
3296	Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™(Активная)
3298	Выдвигающаяся канюля FlexTip™ (Активная)
3425	Двухходовая канюля SideFlō®
3508	Выдвигающаяся канюля-щетка FlexTip™
27g	ПРОДУКТЫ
3256	Канюля PolyTip 23g/38g (зеленый наконечник 2 мм)
3257	Канюля
3258	Канюля FlexTip™ (наконечник 1 мм)
3259	Канюля PolyTip® (27/38g)
3260	Канюля FlexTip™ (наконечник 0,75 мм)
3273	Канюля VFI (1 мм)
3276	Рефлюксная рукоятка с канюлей (Пассивная)
3278	Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™(Активная)
3427	Двухходовая канюля SideFlō®
пру	ГИЕ ПРОДУКТЫ
	**
3223	Удлиняющая трубка (Hammer)

3228 Аспирационная рукоятка (Активная)

3311 Канюля с наконечником в форме оливки

высоким давлением

3243 Удлиняющая трубка для введения жидкости под

Информация о производителе

MedOne Surgical, Inc. 670 Tallevast Road Sarasota, FL 34243 USA

3423 Двухходовая канюля SideFlō®

TEL: 941.359.3129 FAX: 941.359.1708

TOLL FREE (in USA): 1.866.633.6631

www.MedOne.com

Эксклюзивный дистрибьютор в России

OOO «АйТэк» 123298 Россия, Москва

Ул. Берзарина, д. 16, офис 14

Телефон: +7 (495) 944 9102

e-mail: info@eye-tec.ru

www.eye-tec.ru