

A collection of medical instruments, including syringes, needles, and a green-handled device, arranged on a blue tray. The background is a light blue gradient.

ИННОВАЦИИ В ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Каталог

 MedOne®

Выдвигающиеся канюли FlexTip™

Канюли FlexTip™ имеют мягкий гибкий силиконовый наконечник, что обеспечивает аккуратность доступа к сетчатке. Идеальны для аспирации субретинальной жидкости через существующий разрыв или отверстие. Канюли размера XL большей длины (36 мм), упрощают доступ к сетчатке у пациентов с длинным глазом. Коннектор Luer lock обеспечивает надежность соединения с рефлюксной рукояткой или шприцом.



Выдвигающаяся канюля FlexTip™

Канюля имеет мягкий силиконовый наконечник, который может быть выдвинут до 7 мм. Резервуар канюли позволяет создать рефлюкс даже когда канюля выдвинута. Съемный клапан позволяет использовать канюлю для активной/пассивной аспирации. Идеальна для аспирации субретинальной жидкости через существующий разрыв или отверстие.

3299 Выдвигающаяся канюля FlexTip™ 23g

3298 Выдвигающаяся канюля FlexTip™ 25g



Выдвигающаяся канюля-щетка FlexTip™

Выдвигающаяся канюля-щетка имеет мягкий силиконовый наконечник, который полностью убирается внутрь и легко проходит через троакар с внутренним клапаном, затем выдвигается до 1,5 мм. Съемный клапан позволяет использовать канюлю для активной/пассивной аспирации.

3508 Выдвигающаяся канюля-щетка FlexTip™ 25g



Канюли FlexTip™



Канюли FlexTip™

- 3252** Канюля FlexTip™ 23g
Длина 32 мм, наконечник 0,75 мм
- 3230** Канюля FlexTip™ 23g
Длина 32 мм, наконечник 1 мм
- 3231** Канюля FlexTip™ 23g
Длина 32 мм, наконечник 3 мм

- 3251** Канюля FlexTip™ 25g
Длина 32 мм, наконечник 0,75 мм
- 3221** Канюля FlexTip™ 25g
Длина 32 мм, наконечник 1 мм
- 3220** Канюля FlexTip™ 25g
Длина 32 мм, наконечник 3 мм
- 3260** Канюля FlexTip™ 27g
Длина 32 мм, наконечник 0,75 мм
- 3258** Канюля FlexTip™ 27g
Длина 32 мм, наконечник 1 мм



Канюли XL FlexTip™

- 3209** Канюля XL FlexTip™ 23g
Длина 36 мм, наконечник 3 мм
- 3210** Канюля XL FlexTip™ 25g
Длина 36 мм, наконечник 3 мм



Канюли-щеточки FlexTip™

Мягкая силиконовая щетка позволяет нежно очищать сетчатку и совершать манипуляции с ней. Идеально подходит для удаления крови и стекловидного тела с поверхности сетчатки.

- 3232** Канюля FlexTip™ 23g
Длина 32 мм, наконечник 0,75 мм
- 3222** Канюля FlexTip™ 25g
Длина 32 мм, наконечник 0,75 мм
- 3264** Канюля-щеточка FlexTip™ 27g
Длина 32 мм, наконечник 0,75 мм

Короткий наконечник FlexTip™ 0,75 мм легко вводит в клапанный троакар

Двухходовые канюли

Канюли с двумя отверстиями позволяют вводить такие жидкости как перфтор или краситель через центральный просвет внутренней канюли и одновременно обеспечивать пассивный отток BSS через отверстие в наружной канюле, тем самым снижая внутриглазное давление. Дизайн канюли позволяет уменьшить образование пузырьков во время введения жидкости.



Двухходовые канюли

Двухходовые коаксиальные канюли имеют удлиненную внутреннюю канюлю для введения жидкости и наружную канюлю с вентиляционным отверстием для пассивного выхода жидкости или воздуха.

3239 Двухходовые канюли 23g

3240 Двухходовые канюли 25g



Двухходовые канюли SideFlō®

Двухходовые канюли SideFlō® оптимально подходят для введения жидкостей при хирургии малых разрезов (27/29g). Благодаря введению жидкости через боковое отверстие снижена возможность повреждения сетчатки. Многочисленные отверстия в наружной канюле увеличивают выведение жидкости вдвое по сравнению с обычной двухходовой канюлей, тем

самым позволяют быстрее снизить внутриглазное давление. Легко вводятся в троакар с внутренним клапаном.

Патент #9937300

3423 Двухходовая канюля SideFlō® 23g

3425 Двухходовая канюля SideFlō® 25g

3427 Двухходовая канюля SideFlō® 27g



Стандартные витреоретинальные канюли

Тонкостенные канюли с тупым наконечником предназначены для введения и аспирации жидкостей. Канюли XL большей длины (36 мм) облегчают доступ к сетчатке у пациентов с высокой близорукостью или длинным глазом. Коннектор Luer lock обеспечивает надежность соединения с рефлюксной рукояткой или шприцом.



Канюли

- 3234** Канюля 23g
Длина 32 мм
- 3225** Канюля 25g
Длина 32 мм
- 3257** Канюля 27g
Длина 32 мм



Канюли XL

- 3206** Канюля XL 23g
Длина 36 мм
- 3207** Канюля XL 25g
Длина 36 мм

Субретинальные канюли

Канюли PolyTip® и PolyVent™ 38g обладают достаточной жесткостью, чтобы перфорировать сетчатку, что позволяет избежать дополнительной ретиномии. Эти канюли идеально подходят для субретинальных инъекций. Они также могут быть использованы для дренажа малых объемов жидкостей из-под сетчатки. Зеленый цвет наконечника обеспечивает его легкую визуализацию.

Выдвигающиеся канюли с изменяющимся диаметром PolyTip®



Наконечник 38 g выдвигающейся канюли PolyTip® может быть полностью убран, что облегчает прохождение клапанного троакара. Наконечник выдвигается на 5 мм.

3248 Выдвигающаяся канюля PolyTip® 23g
Длина 32 мм, наконечник 38g (0,12 мм)

3247 Выдвигающаяся канюля PolyTip® 25g
Длина 32 мм, наконечник 38g (0,12 мм)



Выдвигающиеся канюли PolyVent™

Выдвигающиеся канюли PolyVent™ позволяют вводить жидкость, одновременно выводя из глаза излишки BSS, что уменьшает давление на внутренние структуры глаза. Наконечник полностью задвигается, что облегчает прохождение клапанного троакара. Зеленый цвет наконечника обеспечивает его легкую визуализацию. Небольшой внутренний диаметр инфузионной трубки снижает потерю жидкости.

3308 Выдвигающаяся канюля PolyVent™ 23g/38g
Длина 32 мм, зеленый наконечник 38g (0,12 мм)

3307 Выдвигающаяся канюля PolyVent™ 25g/38g
Длина 32 мм, зеленый наконечник 38g (0,12 мм)



Субретинальные канюли

Канюли с изменяющимся диаметром PolyTip®



3254 Канюля PolyTip® 23g/38g
Длина 28 мм, диаметр у основания 23g, длина зеленого наконечника 2 мм, его внешний диаметр 38G (0,12 мм)

3233 Канюля PolyTip® 23g/38g
Длина 28 мм, диаметр у основания 23g, длина наконечника 5 мм, его внешний диаметр 38G (0,12 мм)

3255 Канюля PolyTip® 25g/38g
Длина 28 мм, диаметр у основания 25g, длина зеленого наконечника 2 мм, его внешний диаметр 38G (0,12 мм)

3219 Канюля PolyTip® 25g/38g
Длина 28 мм, диаметр у основания 25g, длина наконечника 5 мм, его внешний диаметр 38G (0,12 мм)

3319 Набор PolyTip® Cannula 25g/38g включает канюлю PolyTip 25g/38g и 3243 трубку высокого давления


3256 Канюля PolyTip® 27g/38g
Длина 32 мм, диаметр у основания 27g, длина зеленого наконечника 2 мм, его внешний диаметр 38G (0,12 мм)

3259 Канюля PolyTip® Cannula 27g/38g
Длина 32 мм, диаметр у основания 27g, длина наконечника 5 мм, его внешний диаметр 38G (0,12 мм)

Канюли PolyTip компании MedOne являются эквивалентом канюль "41g" других брендов

Внешний диаметр: 38g

Внутренний диаметр: 41g

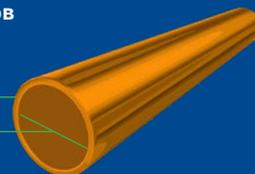


Канюли PolyVent™

Канюли PolyVent™ позволяют вводить жидкость, одновременно выводя из глаза излишки BSS, что уменьшает давление на внутренние структуры глаза во время субретинальных инъекций.



3306 Канюля PolyVent™ 23g/38g
Длина 32 мм, диаметр у основания 23g, длина зеленого наконечника 5 мм, его внешний диаметр 38G (0,12 мм)

3305 Канюля PolyVent™ 25g/38g
Длина 32 мм, диаметр у основания 25g, длина зеленого наконечника 5 мм, его внешний диаметр 38G (0,12 мм)

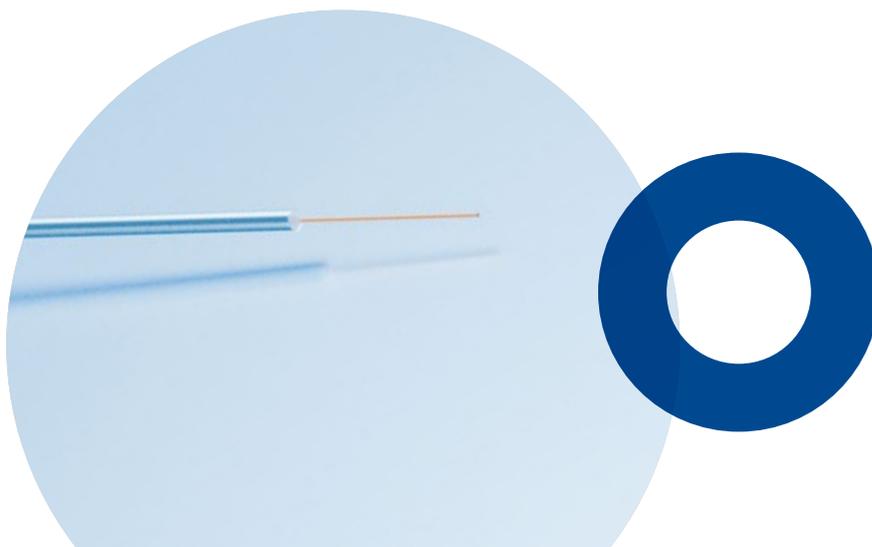

Субретинальные канюли

Изогнутая канюля с изменяющимся диаметром наконечника



Наконечник канюли MicroTip изогнут и имеет диаметр всего 40g (0,1 мм). Металлический наконечник легко перфорирует сетчатку при субретинальных инъекциях. Наконечник изогнут для облегчения визуализации и манипуляций хирурга. Основание канюли имеет диаметр 25g.

3261

Канюля с изогнутым наконечником MicroTip 25g/40g

Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 25g, диаметр наконечника 40g (0,10 мм), длина 5 мм



Нано канюля




Нано канюля целиком выполнена из металла, наконечник диаметром 48g заточен для облегчения манипуляций и визуализации. Позволяет работать с самыми деликатными структурами глаза. Основание канюли имеет диаметр 25g.

3263

Нано канюля 25g/48g

Диаметр у основания 25g, длина 28 мм, диаметр наконечника 48g

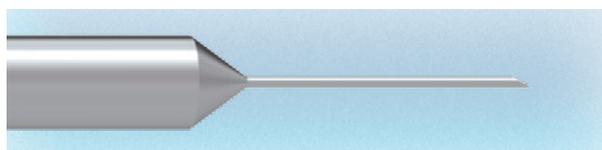

Канюли с изменяющимся диаметром PolyTip®



Канюли с изменяющимся диаметром PolyTip® имеют уникальные технические характеристики: полугибкий наконечник очень маленького диаметра с чрезвычайно тонкими стенками позволяет обеспечить максимально возможный поток жидкости. Коннектор Luer lock обеспечивает надежность соединения канюли с инфузионной линией, шприцом или удлиняющей трубкой.

3218

Канюля PolyTip® 25g/31g

Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 25g, диаметр наконечника 31g, длина наконечника 5 мм. Канюля 31g идеально подходит для дренажа макулярного отверстия и аспирации жидкости

3262

Канюли PolyTip® 25g/33g

Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 25g, диаметр наконечника 33g, длина наконечника 2 мм. Канюля 33g используется для перфорации сетчатки и аспирации жидкости. Тонкие стенки наконечника позволяют обеспечить поток жидкости такой же как при использовании силиконового наконечника 25g. Зеленый цвет наконечника обеспечивает его лучшую визуализацию

Канюля для удаления силиконового масла (Kapran)



Канюля для удаления силиконового масла

Инновационная канюля позволяет удалить масло через малое отверстие без последующего наложения швов. Используя стандартную технику, установите троакар. Затем присоедините трубку-переходник к порту канюли и удалите масло, используя стандартный шприц или систему прибора.

3300 Канюля для удаления силиконового масла 23g (Kapran)
Система состоит из рукоятки, троакара и трубки-переходника



Инфузионные канюли VFI

Канюли VFI имеют очень тонкие стенки, что позволяет вводить тяжелые жидкости, такие как силиконовое масло. Коннектор Luer lock обеспечивает надежное соединение с инфузионной линией, шприцом или введения вязких жидкостей.

3235 Канюля VFI 23g

3226 Канюля VFI 25g


3273 Канюля VFI 27g



Инфузионная канюля PolyTip® VFI

Длина канюли 10 мм позволяет вводить силикон в различные сегменты глаза и видеть наконечник канюли во время ее использования.

3241 Канюля PolyTip® VFI 23g (10 мм)

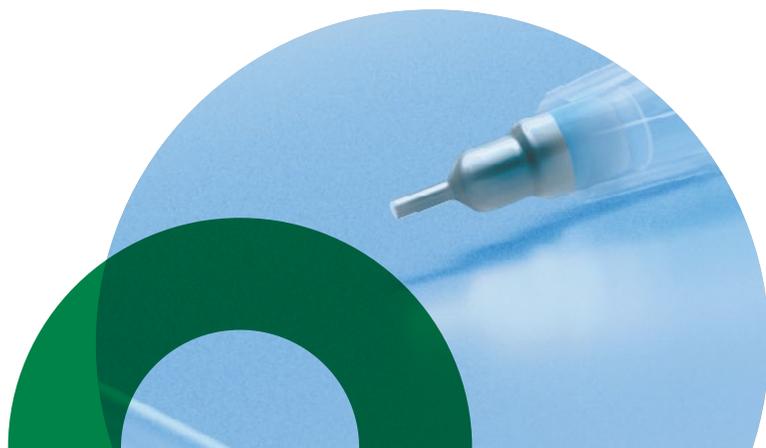

Инфузионные канюли VFI



Инфузионные канюли VFI

Канюли VFI специально предназначены для введения силиконового масла «hands-free» через троакары при выполнении операций 23g, 25g и 27g, при этом силикон вводится в 2 раза быстрее, чем при использовании обычных канюль. Просто установите канюлю VFI в порт троакара и вводите силиконовое масло или БСС. Идеальна для обмена PFO на масло. Не совместима с троакаром Алкон.

- 3246** Инфузионная канюля VFI 23g
- 3245** Инфузионная канюля VFI 25g
- 3301** Инфузионная канюля VFI 27g




Инфузионные канюли для введения вязких жидкостей

Усиленные стенки трубок инфузионных канюль позволяют быстро ввести силиконовое масло под высоким давлением. Канюля также может быть использована для введения БСС. Выступы для подшивания зеленого цвета, что улучшает их визуализацию. Коннектор Luer lock надежно соединяет канюлю с инфузионной линией.

- 3200** Канюля для вязкой жидкости 20g (4 мм)
Инфузионная трубка 16 см с наконечником 4 мм
- 3201** Канюля для вязкой жидкости 20g (6 мм)
Инфузионная трубка 16 см с наконечником 6 мм



4 мм 6 мм

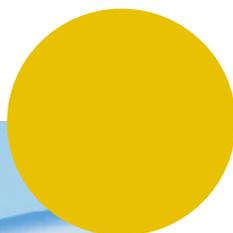

Рефлюксные инструменты Backflush

Рукоятка Backflash

Рукоятки Backflush высоко функциональны и эргономичны. Легкость манипуляции во время хирургии, достигается благодаря короткой рукоятке, особенно при использовании широкоугольных систем. Дизайн области захвата рукоятки позволяет обеспечить четкий контроль во время хирургических процедур. Наличие коннекторов Luer lock позволяет быстро присоединить совместимые с ней канюли, включая все канюли MedOne. Съёмный клапан позволяет использовать рукоятку для активной и пассивной аспирации.

3228 Рефлюксная рукоятка



Рефлюксные инструменты Backflush

Компания MedOne объединила самые популярные канюли и аспирационные рукоятки в один удобный инструмент, позволяющий точно контролировать аспирацию. Есть инструменты с активной и пассивной аспирацией.

- 3286** Рефлюксная рукоятка с канюлей 23g Пассивная
- 3290** Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™ 23g Активная
- 3295** Рефлюксная рукоятка с канюлей 25g Пассивная
- 3296** Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™ 25g Активная
- 3276** Рефлюксная рукоятка с канюлей 27g Пассивная
- 3278** Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™ 27g Активная

Специализированные инструменты

НОВИНКА Канюля GentleJect™

Система GentleJect™ идеальна для введения красителей во время операции. Клапан позволяет подготовить для введения определенное количество жидкости. Мягкий силиконовый резервуар позволяет осторожно и дозированно вводить жидкость, что предотвращает повреждение глазных структур. Резервуар прозрачен для лучшей визуализации оставшейся жидкости. Коннектор Luer lock позволяет соединить систему с любой канюлей. Идеальна для использования с двухходовой канюлей.

Создана в сотрудничестве с доктором Martin Charles, Буэнос Айрес, Аргентина


3316 Канюля GentleJect™ 25g



Специализированные канюли

Канюля для введения вискоэластиков

Канюля для вискодиссекции 25g имеет выдвигающийся изогнутый наконечник, который позволяет вводить вискоэластик для мягкой диссекции эпиретинальных мембран. В выдвинутом состоянии изогнутый наконечник позволяет вводить вискоэластик параллельно сетчатке, в убранном состоянии легко вводится в троакар. Коннектор Luer lock позволяет легко присоединить шприц.

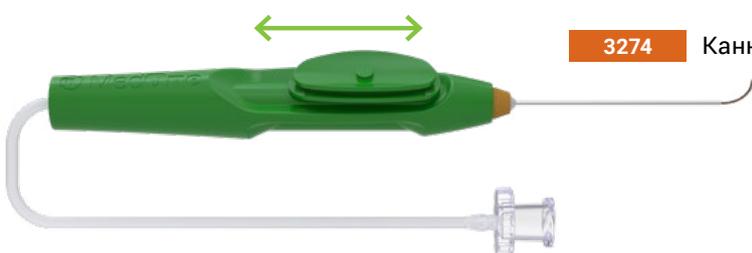

3274

Канюля для вискодиссекции 25g

Канюля с наконечником в форме оливки (El Rayes)


Изогнутая канюля с наконечником в форме оливки разработана для введения жидкости, в первую очередь в переднее супрахориоидальное пространство. Особенно удобно для введения вискоэластиков, чтобы достигнуть эффекта пломбирования при лечении периферийной отслойки сетчатки. Канюлю также можно использовать для введения лекарственных средств или удаления стекловидного тела или другой жидкости из супрахориоидального пространства.

Разработана совместно с доктором Ehab N.El Rayes, Каир, Египет

3311

Канюля с наконечником в форме оливки 23g (El Rayes)

Набор включает канюлю и удлиняющую трубку для введения жидкости под высоким давлением

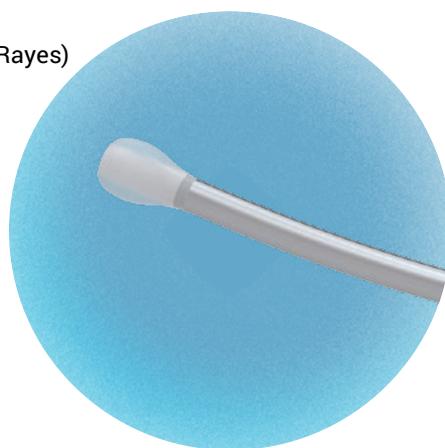

Специализированные аксессуары



Удлиняющая трубка для введения жидкости под высоким давлением

Удлиняющая трубка для введения жидкости под высоким давлением. Силиконовая трубка длиной 15 см с коннекторами Luer lock (папа/мама). Может использоваться с вышеперечисленными канюлями для введения тяжелых жидкостей.

3243

Удлиняющая трубка для введения жидкости под высоким давлением 15 см

Удлиняющая трубка (Hammer)

Короткая силиконовая удлиняющая трубка отделяет шприц от канюли, позволяя точно позиционировать канюлю, когда инъекция выполняется другой рукой или когда инъекцию выполняет ассистент. Просвет трубки имеет объём всего 0,1 мл, что сокращает потерю жидкости и увеличивает скорость доставки жидкости в место инъекции.

3223

Удлиняющая трубка (Hammer)

Силиконовая трубка 5 см с коннектором Luer lock.



20g ПРОДУКТЫ

- 3200 Канюля для вязкой жидкости 20g (4 мм)
- 3201 Канюля для вязкой жидкости 20g (6 мм)

23g ПРОДУКТЫ

- 3206 Канюля XL 23g
- 3209 Канюля XL FlexTip™ 23g
- 3230 Канюля FlexTip™ 23g
- 3231 Канюля FlexTip™ 23g
- 3232 Канюля FlexTip™ 23g
- 3233 Канюля PolyTip® 23g/38g
- 3234 Канюля 23g
- 3235 Канюля VFI 23g
- 3239 Двухходовая канюля 23g
- 3241 Канюля PolyTip® VFI 23g (10 мм)
- 3246 Инфузионная канюля VFI 23g
- 3248 Выдвигающаяся канюля PolyTip® 23g
- 3252 Канюля FlexTip™ 23g
- 3254 Канюля PolyTip® 23g/38g
- 3286 Рефлюксная рукоятка с канюлей 23g
Пассивная
- 3290 Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™
23g Активная
- 3299 Выдвигающаяся канюля FlexTip™ 23g
- 3300 Канюля для удаления силиконового масла
23g (Kapran)
- 3306 Канюля PolyVent™ 23g/38g
- 3308 Выдвигающаяся канюля PolyVent™ 23g/38g
- 3311 Канюля с наконечником в форме оливки 23g
(El Rayes)
- 3423 Двухходовая канюля SideFlō® 23g

25g ПРОДУКТЫ

- 3207 Канюля XL 25g
- 3210 Канюля XL FlexTip™ 25g
- 3218 Канюля PolyTip® 25g/31g
- 3219 Канюля PolyTip® 25g/38g
- 3220 Канюля FlexTip™ 25g
- 3221 Канюля FlexTip™ 25g
- 3222 Канюля FlexTip™ 25g
- 3225 Канюля 25g
- 3226 Канюля VFI 25g

- 3240 Двухходовая канюля 25g
- 3245 Инфузионная канюля VFI 25g
- 3247 Выдвигающаяся канюля PolyTip® 25g
- 3251 Канюля FlexTip™ 25g
- 3255 Канюля PolyTip® 25g/38g
- 3261 Канюля с изогнутым наконечником MicroTip
25g/40g
- 3262 Канюли PolyTip® 25g/33g
- 3263 Nano Cannula 25g/48g
- 3274 Канюля для вискодиссекции 25g
- 3295 Рефлюксная рукоятка с канюлей 25g
Пассивная
- 3296 Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™
25g Активная
- 3298 Выдвигающаяся канюля FlexTip™ 25g
- 3305 Канюля PolyVent™ 25g/38g
- 3307 Выдвигающаяся канюля PolyVent™ 25g/38g
- 3316 Канюля GentleJect™ 25g
- 3319 Набор PolyTip® Cannula 25g/38g
- 3425 Двухходовая канюля SideFlō® 25g
- 3508 Выдвигающаяся канюля-щетка FlexTip™ 25g

27g ПРОДУКТЫ

- 3256 Канюля PolyTip® 27g/38g
- 3257 Канюля 27g
- 3258 Канюля FlexTip™ 27g
- 3259 Канюля PolyTip® Cannula 27g/38g
- 3260 Канюля FlexTip™ 27g
- 3264 Канюля-щетка FlexTip™ 27g
- 3273 Канюля VFI 27g
- 3276 Рефлюксная рукоятка с канюлей 27g
Пассивная
- 3278 Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™
27g Активная
- 3301 Инфузионная канюля VFI 27g
- 3427 Двухходовая канюля SideFlō® 27g

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ

- 3228 Рефлюксная рукоятка
- 3223 Удлиняющая трубка (Hammer)
- 3243 Удлиняющая трубка для введения
жидкости под высоким давлением

Информация о производителе

MedOne Surgical, Inc.
670 Tallevast Road
Sarasota, FL 34243 USA
TEL: 941.359.3129
FAX: 941.359.1708
TOLL FREE (in USA): 1.866.633.6631
www.MedOne.com

 MedOne®

Эксклюзивный дистрибьютор в
России ООО «Айтэк»
123298 Россия, Москва
ул. 3-я Хорошевская, д.21 к.6
Телефон: +7 (495) 489 9102
e-mail: info@eye-tec.ru
www.eye-tec.ru



EyeTec

Наведите камеру на
QR-код, чтобы перейти
на сайт www.eye-tec.ru

